



NOVA
CERRAHİ ZİMBALAR

NOVA
SURGICAL STAPLERS

Guidanceport
ENDOSCOPIC ASSESS

Nova Energy

Nova Surgery

No.51 Shuishan Road, Zhonglou Economic Development District,
Changzhou, Jiangsu, Çin, Posta kodu: 213023

+86 1816 8812 599

info@xnystaplers.com

www.xnymedical.com

Şirket Profili

XNY Medical

1985 yılında kurulan Changzhou Xin Neng Yuan Medical Staplers Co., Ltd (XNY Medical), küresel kalite standartlarını, müşteri memnuniyetini ve yenilikçiliği önceliklendiren, uluslararası düzeyde tanınmış bir tıbbi cihaz şirkettir. Yıllar içinde, uluslararası standartların üzerinde, yenilikçi cerrahi zimbalar sunduk. Yakın zamanda araştırma, klinik faaliyetler ve üretim hattımızı genişleterek laparoskopik aksesuarların öncü tedarikçisi haline geldik ve tıbbi endüstride güvenilir bir ortak olarak konumumuzu sağlamlaştırdık.



İÇİNDEKİLER TABLOSU

ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA 60 MM	3
ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA 75 MM	4
MOTORLU ENDO NOVA LİNEER KESİCİ ZIMBA	5-6
ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA İÇİN KARTUŞ	7-8
LİNEER KESİCİ ZIMBA	9-10
DAİRESEL ZIMBA	11-12
ENDOSKOPIK DAİRESEL ZIMBA	13-14
HEMOROİDAL DAİRESEL ZIMBA	15-16

ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA 60 MM



ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KİLİTLEME MEKANİZMASI
Kolay kartuş bağlantısı için
uçtan uca işaretlenmiştir



GERİ DÖNÜŞ DÜĞMESİ
Kartuş değişimi için kolaylık
sağlar ve cerrahi operasyon
sırasında enfeksiyon riskini
azaltır



**GENİŞLETİLMİŞ EKLEM
KOLU**
Daha az kuvvetle daha kolay
açılandırma



KAYMAZ KAPLAMALI SAP
Kullanım sırasında gelişmiş
lateks içermeyen kavrama
kontrolü



MAFSALLI
45°'ye kadar 6 kademeli
açı ayarı



TEK ELLE KONTROL
Kartuş çenesi tek elle
açılıp/kapatılabilir



TAM AÇILI ROTASYON
360° Dönme özelliği
dokulara erişim kolaylığı
sağlar



GENİŞ TETİK
Çene açma/bıçak geri
çekme tetiği



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tüm 30 mm, 45 mm ve 60 mm kartuşlarla uyumludur
- Üç farklı uzunluktaki cihaz şaftı farklı cerrahlara uyum sağlayabilir
- Operasyon için gerçek anlamda tek elle kullanılan cihaz.


SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNYB-S	Endo Nova Kesici Küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNYB-M	Endo Nova Kesici Standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNYB-L	Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu




ENDO NOVA MANUEL ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA 75 MM

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

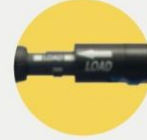

**KİLİTLEME
MEKANİZMASI**
Kolay kartuş bağlantısı
için uçtan uca
işaretlenmiştir

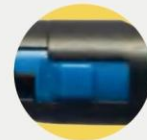

KARTUŞ ÇIKARMA
Yeni kartuş değişimi için
kolaydır



**GENİŞLETİLMİŞ EKLEM
KOLU**
Daha az kuvvetle daha
kolay açılma



EKSTRA KESME KENARI
75 mm'ye kadar dikiş
uzunluğu



MAFSALLI
45°'ye kadar 6 kademeli açı
ayarı



TEK ELLE KONTROL
Kartuş çenesi tek elle
açılıp/kapatılabilir



GENİŞ TETİK
Çene açma/bıçak geri
çekme tetiği



GENİŞ TETİK
Çene açma/
bıçak geri
çekme tetiği



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Tüm 30 mm, 45 mm, 60 mm ve 75 mm kartuşlarla uyumludur
- Üç farklı uzunluktaki cihaz şaftı farklı cerrahlara uyum sağlayabilir
- Operasyon için gerçek anlamda tek elle kullanılan cihaz

SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNYA-S	Endo Nova Kesici Küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNYA-M	Endo Nova Kesici Standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNYA-L	Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu



MOTORLU ENDO NOVA LİNEER KESİCİ ZIMBA



ÇIKARILABİLİR BATARYA

Batarya Ömrü: 50 Ateşleme
Düşük sıcaklıklı plazma sterilizasyonu



ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA

Şarj Tipi: C-Tipi Şarj Cihazı



C Tipi



YENİDEN KULLANILABİLİR TUTAMAÇ

Kullanım Ömrü: 300 Ateşleme
Düşük sıcaklıklı plazma sterilizasyonu



EVRENSEL UYUMLULUK

Tüm XNY kartuşları 30 - 75 mm

GERÇEK ZAMANLI SIKIŞTIRMA KUVVETİ

GERÇEK ZAMANLI GERİ BİLDİRİM

Sıkıştırma kuvveti, Ateşleme ilerlemesi, Kartuş tipi, Batarya durumu



SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Şaft Uzunluğu	Birim/Kutu
XNY-S	Motorlu Endo Nova Kesici küçük ebatlı	60 mm	1 adet/kutu
XNY-M	Motorlu Endo Nova Kesici standart ebatlı	160 mm	1 adet/kutu
XNY-L	Motorlu Endo Nova Kesici X-Large ebatlı	260 mm	1 adet/kutu



TEK ELLE KONTROL

Rotasyon, ateşleme, çene açma ve kapama için



TAM MANUEL ROTASYON

360° dönme özelliği dokulara erişim kolaylığı sağlar



NFC

Cihaz tanıma için özel çipler



MAFSALLI

45°'ye kadar 6 kademeli açma ayarı




KAYMAZ KAPLAMALI SAP

Kullanım sırasında gelişmiş lateks içermeyen kavrama kontrolü



GERİ DÖNÜŞ DÜĞMESİ

Kartuş değişimi için kolaylık sağlar ve cerrahi operasyon sırasında enfeksiyon riskini azaltır

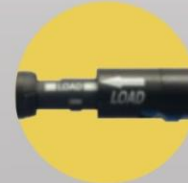

KİLİTLEME MEKANİZMASI

Kolay kartuş bağlantısı için uçtan uca işaretlenmiştir

ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ ZIMBA İÇİN KARTUŞ




Dış sıra 90
Orta sıra 90
İç sıra 90



ÜSTÜN PERFORMANS

Kademeli sıkıştırma sağlayan basamaklı kartuş yüzeyi ve üç sıra farklı yükseklikte zimbalar

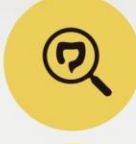

AZALTILMIŞ ANASTOMOTİK SIZINTILAR

Alternatif markalara kıyasla



DAHA AZ HAVA SIZINTISI

Alternatif markalara kıyasla fizyolojik akciğer modelinde

ÜRÜN VERİLERİ

Kartuş Kodu	Zimba Yüksekliği	Zimba Sayısı	Zimba Çapı	Dikiş Uzunluğu	Doku Kalınlığı
XNYJ30LA	2.0/2.5/3.0	48	0.2	30	Vasküler / Orta
XNYJ45LA	2.0/2.5/3.0	66	0.2	45	Vasküler / Orta
XNYJ45MA	3.0/3.5/4.0	66	0.2	45	Orta / Kalın
XNYJ45HA	4.0/4.5/5.0	66	0.2	45	Ekstra - Kalın
XNYJ60LA	2.0/2.5/3.0	90	0.2	60	Vasküler / Orta
XNYJ60MA	3.0/3.5/4.0	90	0.2	60	Orta / Kalın
XNYJ60HA	4.0/4.5/5.0	90	0.2	60	Ekstra - Kalın
XNYH3020	3.0/3.5/4.0	114	0.2	75	Orta / Kalın
XNYH3040	4.0/4.5/5.0	144	0.2	75	Ekstra - Kalın



Nova Teknoloji

Geleneksel Teknoloji

DAHA İYİ PERFÜZYON

Kademeli sıkıştırma profili ve farklı yükseklikteki zimbalar, zımba hattına daha fazla perfüzyon sağlar

ÜSTÜN SIKIŞTIRMA

Herhangi bir travmatik etkiye neden olmadan doku kaymasını önleyen ideal sıkıştırma kuvveti



DAHA KOLAY YERLEŞTİRME

Daha geniş çene açıklığı, daha az doku manipülasyonu potansiyeli ile çenelerin kalın doku üzerine yerleştirilmesini kolaylaştırabilir



SİPARİŞ VERİLERİ

Madde	Description	Doku Kalınlığı
XNYJ30LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 30mm için Mafsalı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ45LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsalı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ60LA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsalı BRONZ kartuş Vasküler/Orta Kartuş	Orta / Kalın
XNYJ45MA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsalı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın
XNYJ60MA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsalı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Vasküler / Orta
XNYJ45HA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 45mm için Mafsalı SİYAH kartuş Ekstra-Kalın Kartuş	Orta / Kalın
XNYJ60HA	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 60mm için Mafsalı SİYAH kartuş Ekstra-Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın
XNYH3020	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 75 mm için Mafsalı MOR kartuş Orta/Kalın Kartuş	Orta / Kalın
XNYH3040	ENDONOVA Endoskopik Lineer Kesici 75 mm için Mafsalı SİYAH kartuş Orta/Kalın Kartuş	Ekstra - Kalın

LİNEER KESİCİ ZIMBA



ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KESME BİÇAĞI SINIRININ ÖTESİNDE 4 EKSTRA ZIMBA

Güvenilir hemostaz sağlar



DOKU TUTMA PİMİ

Distal uçta doku kaymasını önler



GÜVENLİK KİLİDİ

Kullanıcıyı geri çekilebilir bıçaklardan korur




GÜVENLİK KORUMALI ATEŞLEME DÜĞMESİ



KADEMELİ KESME GÖSTERGESİ

Örsün her iki tarafında

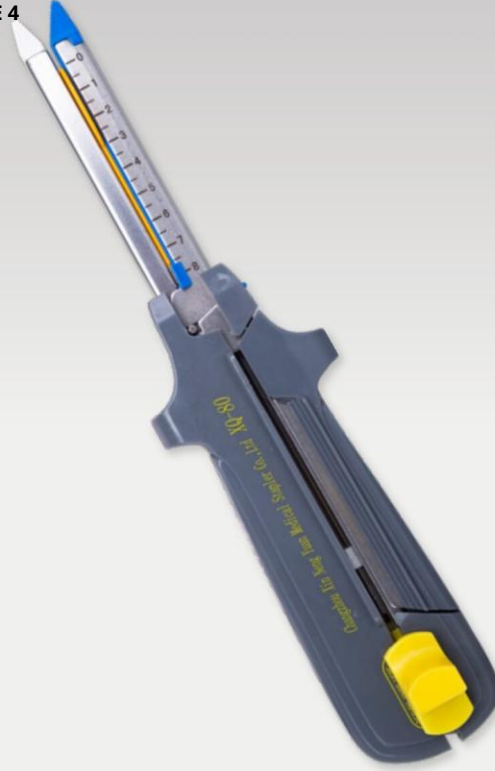

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Kesme Uzunluğu	Renk Kodu	Açık Zimba Yüksekliği	Zimba Miktarı	Birim/Kutu
XQ-60-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 60 mm	56 mm	Mavi	3.8 mm	15x4	1 adet/kutu
XQ-60-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 60 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu
XQ-80-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 80 mm	76 mm	Mavi	3.8 mm	20x4	1 adet/kutu
XQ-80-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 80 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu
XQ-100-3.8	Nova™ Lineer Kesici Normal kalınlıktaki doku için 100 mm	96 mm	Mavi	3.8 mm	25x4	1 adet/kutu
XQ-100-4.5	Nova™ Lineer Kesici kalın doku için 100 mm		Yeşil	4.5 mm		1 adet/kutu



LİNEER KESİCİ ZIMBA İÇİN KARTUŞ

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



ARKA 'MAKAS' TİPİ, ARA KONUM

Farklı cerrahların tercihlerine uyum sağlar




ÖN ARA KONUM HİZALAMA FONKSİYONU

Tek elle kullanıma ve dokunun yeniden konumlandırılmasına olanak tanır

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Cihaz başına toplam 11 ateşleme ile 10 kez yeniden yüklenebilir
- Farklı cerrahların tercihlerine uyum sağlamak için iki ara konum (ön ve arka)
- Mükemmel şekillendirilmiş 'B' tipi zimbalar ile üstün, pürüzsüz ve optimize edilmiş performans
- Rezeksiyon hattının ötesinde 4 zimba ile güvenli zimba hattı oluşumu
- Yerleşik güvenlik kilidi mekanizması
- Çeşitli doku kalınlıkları için farklı kartuş seçenekleri mevcuttur

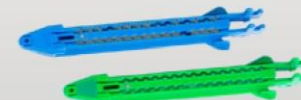

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Ürün Açıklaması	Renk Kodu	Açık Zimba Yüksekliği	Zimba Miktarı	Birim/Kutu
60-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 60 ebatlı	Mavi	3.8 mm	15x4	6 adet/kutu
60-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalın doku için 60 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu
80-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 80 ebatlı	Mavi	3.8 mm	20x4	6 adet/kutu
80-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalın doku için 80 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu
100-3.8	Nova™ Lineer Kesici Kartuş Normal kalınlıktaki doku için 100 ebatlı	Mavi	3.8 mm	25x4	6 adet/kutu
100-4.5	Nova™ Lineer Kesici Kartuş kalın doku için 100 ebatlı	Yeşil	4.5 mm		6 adet/kutu

TEK KULLANIMLIK LİNEER KESİCİ ZIMBA



ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KESME BİÇAĞI SINIRININ ÖTESİNDE 4 EKSTRA ZIMBA
Güvenilir hemostaz sağlar



DOKU TUTMA PİMİ
Distal uçta doku kaymasını önler



GÜVENLİK KİLİDİ
Operatörleri geri çekilebilir bıçaktan korur.
Cihaz bu tasarımla ikinci kez ateşlenemez
veya boş kartuşla kapatılamaz



DOKU BOŞLUĞU KONTROL MEKANİZMASI
Proksimal uçtan distal uca kadar tutarlı
zimba oluşumu sağlar



NET KADEMELİ KESME GÖSTERGELERİ
Örsün her iki tarafında



SERBEST BIRAKMA DÜĞMESİ
Çatalları kolayca ve hızla açar



ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

XNY Nova™ tek kullanımlık lineer kesici ZIMBAlar; abdominal, jinekolojik, pediatrik ve torasik cerrahilerde eksizyon, transeksiyon ve zımbalama işlemleri için titizlikle tasarlanmıştır. Temel olarak yüksek işlevsellik, güvenilirlik ve üstün performansa odaklanarak kullanıcı deneyiminin kusursuz olmasını sağlıyoruz. XNY lineer kesiciler, Nova ürün yelpazemiz genelinde son derece pürüzsüz kesim ve güvenli zimba hattı oluşumu sağlar



ÜRÜN BİLEŞENLERİ



KESME BİÇAKLI KARTUŞ
Kesme bıçağı, tümör metastazı olasılığını azaltırken daha pürüzsüz, daha hassas ve daha güvenli kesme performansı sağlamak için kartuş üzerinde tasarlanmıştır



ÇİFT TARAFLI ATEŞLEME DÜĞMESİ
Çift taraflı ateşleme düğmesine sahip cihaz, operasyonu daha kolay hale getirecek şekilde her iki taraftan da ateşlenebilir

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Cihaz başına toplam 11 ateşleme ile 10 kez yeniden yüklenebilir
- Mükemmel şekilli 'B' tipi zimbalar ile üstün, pürüzsüz ve zimba performansı; rezeksiyon hattının ötesinde 4 zimba ile güvenli zimba hattı oluşumu
- Yerleşik güvenlik kilidi mekanizması
- Çeşitli doku kalınlıkları için daha fazla zimba yüksekliği seçeneği mevcuttur

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Tutamaç Kodu	Kartuş Kodu	Kesme Uzunluğu	Dikiş Uzunluğu	Renk Kodu	Açık Zimba Yüksekliği	Zimba Miktarı
XQA-60-3.8	LCR60B	60mm	65mm	Mavi	3.8mm	15×4
XQA-60-4.5	LCR60G			Yeşil	4.5mm	
XQA-80-3.8	LCR80B	80mm	85mm	Mavi	3.8mm	20×4
XQA-80-4.5	LCR80G			Yeşil	4.5mm	
XQA-100-3.8	LCR100B	100mm	105mm	Mavi	3.8mm	25×4
XQA-100-4.5	LCR100G			Yeşil	4.5mm	

DAİRESEL ZIMBA



ÜRÜN BİLEŞENLERİ

**GELİŞMİŞ BİÇAK MEKANİZMASI**


Daha keskin, güvenilir ve tutarlı kesim için bıçağı hassas bir şekilde monte eder ve iter

**PLASTİK KESME HALKASI**

Ateşleme sırasında aktif sesli ve dokunsal geri bildirim

**DÜŞÜK PROFİLLİ ÖRS**

Gelişmiş ergonomi ve güvenilirlik ile pürüzsüz giriş/çıkış

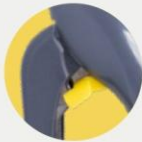**PATENTLİ OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU**

Güvenlik serbest bırakma kolu, sesli bir 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır

**KONTROL EDİLEBİLİR ZIMBA YÜKSEKLİĞİ**

1.0 - 2.5 mm aralığındaki zimbalar, farklı doku kalınlıklarının kapatılmasına olanak tanır



SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Ürün Açıklaması	Birim/Kutu
WGWB-20	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 20 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-22	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 22 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-24	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 24 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-26	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 26 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-29	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 29 ebatlı	1 adet/kutu
WGWB-32	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimba, 32 ebatlı	1 adet/kutu

DAİRESEL ZIMBA

**NOVA™ PATENTLİ SARI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU**

Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, sarı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır

**BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ**

Zimba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar

**ARA PARÇA SEKMESİ**

Çift zımbalama tekniği için yardımcı trokar ve trokar uygulaması dahil

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Mükemmel şekillenmiş zimbalar için patentli trapez zimba tasarımı
- Ultra keskin kesim sağlayan 440 ithal medikal sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Aerodinamik, düşük profilili örs tasarımı
- Kullanım sırasında ergonomik ve konforlu
- Sıkıştırma sırasında prosedürün sürekli görselleştirilmesi için sarı otomatik serbest bırakma fonksiyonu

SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Açık Zimba Yüksekliği	Kapalı Zimba Yüksekliği	Dış Çapı	Zimba Miktarı	Renk Kodu
WGWB-20	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	20.5 mm	16	Turuncu
WGWB-24	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	24.5 mm	18	Sarı
WGWB-26	4.7 mm	1.0 mm - 2.5 mm	26.5 mm	22	Beyaz
WGWB-29	5.6 mm	1.0 mm - 2.5 mm	29.5 mm	24	Mavi
WGWB-32	5.6 mm	1.0 mm - 2.5 mm	32.5 mm	26	Yeşil

ENDOSKOPIK DAİRESEL ZIMBA



ÜRÜN BİLEŞENLERİ

**GELİŞMİŞ BİÇAK MEKANİZMASI**

Daha keskin, güvenilir ve tutarlı kesim için bıçağı hassas bir şekilde monte eder ve iter

**PLASTİK KESME HALKASI**

Ateşleme sırasında aktif sesli ve dokunsal geri bildirim

**DÜŞÜK PROFİLLİ ÖRS**

Gelişmiş ergonomi ve güvenilirlik ile pürüzsüz giriş/çıkış

**KONTROL EDİLEBİLİR ZIMBA YÜKSEKLİĞİ**

1.0 - 2.5 mm aralığındaki zimbalar, farklı doku kalınlıklarının kapatılmasına olanak tanır

**KAYMAZ DÜĞME**


Örsün açılmasına ve kapanmasına yardımcı olmak için KELEBEK SOMUN şeklinde




SİPARİŞ VERİLERİ

Code	Ürün Açıklaması	Birim/Kutu
WGWC-20	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 20 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-22	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 22 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-24	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 24 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-26	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 26 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-29	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 29 ebatlı	1 adet/kutu
WGWC-32	Nova™ Tek Kullanımlık Endoskopik Dairesel Zimbalar, 32 ebatlı	1 adet/kutu

ENDOSKOPIK DAİRESEL ZIMBA

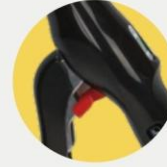**NOVA™ PATENTLİ KIRMIZI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU**

Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, kırmızı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'kık' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır

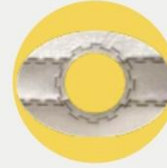**BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ**

Zimba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Mükemmel şekillenmiş zimbalar için patentli trapez zimba tasarımı
- Ultra keskin kesim sağlayan 440 ithal medikal sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Aerodinamik, düşük profilili örs tasarımı
- Kullanım sırasında ergonomik ve konforlu
- Sıkıştırma sırasında prosedürün sürekli görselleştirilmesi için sarı otomatik serbest bırakma fonksiyonu

ÜRÜN VE SİPARİŞ VERİLERİ

Kod	Uzunluk	Dış Çap	Açık Zimba Yüksekliği	Zimba Miktarı	Renk Kodu
WGWC-20	460 mm	12.2 mm	4.7 mm	16	Turuncu
WGWC-22	460 mm	14.0 mm	4.7 mm	18	Light Sarı
WGWC-24	460 mm	15.3 mm	4.7 mm	18	Sarı
WGWC-26	460 mm	17.4 mm	4.7 mm	22	Beyaz
WGWC-29	460 mm	20.5 mm	4.7 mm	24	Mavi
WGWC-32	460 mm	23.2 mm	4.7 mm	26	Light Yeşil

HEMOROİDAL DAİRESEL ZIMBA




ÜRÜN BİLEŞENLERİ

**KONİK ÖRS TASARIMI**

Anastomotik uçtan gerilimsiz ayrılma

**ŞEFFAF HAZNE KAPAĞI**

Hazneye yerleşen dokuların görünürlüğünü artırır

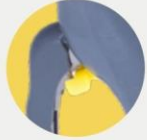**DERİNLİK İŞARETLEME GÖSTERGESİ****PATENTLİ OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU**

Güvenlik serbest bırakma kolu, sesli bir 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır

**KAYMAZ DÜĞME**


Örsün açılmasına ve kapanmasına yardımcı olmak için KELEBEK SOMUN şeklinde



Kod	Ürün Açıklaması	Uzunluk (mm)	Dış Çap	Zimba Miktarı	Açık Zimba Yüksekliği	Zimba Genişliği	Adet/Kutu
GWC-34	Nova™ Hemoroid İçin Tek Kullanımlık Dairesel Zimbalar, GWC-34	395	34 mm	30	4.6 mm	3.8 mm	1 adet/kutu



HEMOROİDAL DAİRESEL ZIMBA

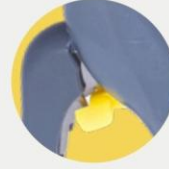**NOVA™ PATENTLİ SARI-OTOMATİK SERBEST BIRAKMA GÜVENLİK FONKSİYONU**

Örs başı sıkıştırıldığında, kırmızı gösterge yeşil pencere göstergesinin içine ulaştığında, sarı güvenlik serbest bırakma kolu net bir sesli 'klik' sesi ile kullanıcıyı otomatik olarak uyarır


**BENZERSİZ ZIMBA KESME ÖZELLİĞİ**

Zimba yapışması olmaz ve mükemmel anastomoz sağlar

TAM AKSESUAR SETİ

**DAİRESEL ANAL DİLATÖR**

Hemoroidal Dairesel Zimbanın anal kanala yerleştirilmesine yardımcı olur

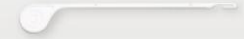**SÜTÜR GEÇİRİCİ**

Dikişlerin hazneden çekilmesine yardımcı olur

**TORBA AĞZI SÜTÜR ANOSKOBU**

Dentat çizginin üzerinde torba ağzı dikiş uygulamasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sarı otomatik serbest bırakma güvenlik fonksiyonu
- Daha fazla doku hacmini barındırmak için daha geniş hazne
- Kolay yerleştirme ve ateşleme sonrası gerilimsiz çıkarma için düşük profilili örs tasarımı; Aerodinamik sap tasarımı